

# Español

## SILOPAD™ Puntos Sensibles a la Presión Pressure Sensitive Dots

- El producto libera lentamente un aceite mineral de propiedad médica (USP) para suavizar e hidratar la piel.
- El producto ha sido probado por dermatólogos, es lavable y reusable.

### Indicaciones:

- Para el tratamiento de lesiones producidas por presión y fricción, tales como ampollas, callos o puntos de presión. También ayuda a reducir el tejido cicatrizado.

### Instrucciones para su uso:

- Lavar y secar la zona afectada.
- Adherir el punto a la férula, vendaje o venda en la posición donde el punto estará en contacto directo con la zona afectada.
- Quitar el producto durante 3 a 4 horas al día, como mínimo, para dejar respirar la piel.

### Cuidado recomendado:

- Recomendamos lavar el producto a mano. Secarlo al aire y empolverar levemente con talco para disminuir la adhesión.

**ADVERTENCIA:** No aplicar el producto sobre una herida abierta. En caso de producirse irritación, malestar o mala circulación, suspender el uso y notificar inmediatamente al médico. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Producto No.10255

Plano

15 por paquete



**SILIPOS**®  
Innovative Gel Solutions™

7049 Williams Road  
Niagara Falls, NY 14304  
United States of America  
Tel: (800) 229-4404  
(716) 283-0700  
Fax: (716) 283-0600

WMDE  
Bergerweg 18  
6085 AT Horn  
Holland

[www.silipos.com](http://www.silipos.com)


Made in U.S.A.  
Licensed under U.S. Patent number  
6,552,109

9566-9



# SILOPAD™ Pressure Sensitive Dots

GEL INSIDE™

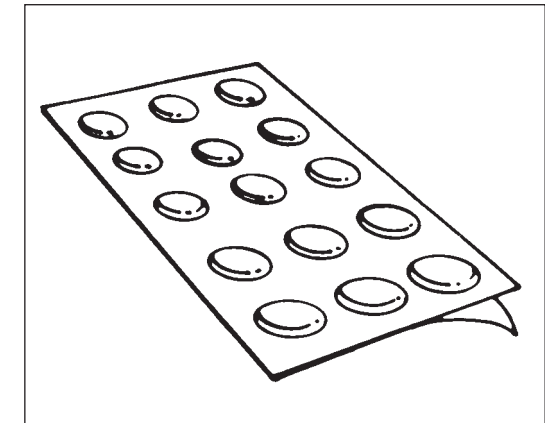

**SILIPOS**®  
Innovative Gel Solutions™  
[www.silipos.com](http://www.silipos.com)



## English

### SILOPAD™ Pressure Sensitive Dots

- Product slowly releases a medical grade mineral oil (USP) to soften and moisturize the skin.
- Product is dermatologist tested, washable and reusable.

#### Indications:

- For treatment of pressure- and friction-induced lesions such as blisters, corns, calluses or pressure points. Also helps to reduce scar tissue.

#### Directions for Use:

- Wash and dry affected area.
- Adhere dot to splint, bandage or dressing on the position where dot will be in direct contact with the affected area.
- Remove product at least 3 to 4 hours daily to allow skin to breathe.

#### Recommended Care:

- We recommend that you hand wash product. Air dry product and lightly dust gel with talcum powder to decrease tackiness.

**WARNING:** Do not place product on an open wound. If irritation, discomfort or poor circulation occurs, discontinue use and notify your physician *immediately*. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Product #10255

Flat

15 per pkg.



## Deutsch

### SILOPAD™ Druckschutz-Punkte Pressure Sensitive Dots

- Die Druckschutz-Punkte geben langsam ein hochwertiges medizinisches Mineralöl (USP) ab, das die Haut mit Feuchtigkeit versorgt und sie geschmeidiger macht.
- Das Produkt ist dermatologisch getestet, waschbar und wiederverwendbar.

#### Indikationen:

- Für die Behandlung von druck- und reibungsbedingten Läsionen, wie Blasen, Hühneraugen, Schwielen und Druckstellen. Wirkt auch unterstützend bei der Rückbildung von Narbengewebe.

#### Anwendungsanleitung:

- Die betroffene Stelle waschen und abtrocknen.
- Den Punkt so an Schiene, Bandage oder Verband anbringen, daß er direkt auf der betroffenen Stelle liegt.
- Zur besseren Atmung der Haut Druckschutz-Punkt für mindestens 3 bis 4 Stunden pro Tag abnehmen.

#### Pflegeanleitung:

Es wird empfohlen, die Druckschutz-Punkte mit der Hand zu waschen und an der Luft trocknen zu lassen. Gegen Klebewirkung das Gel leicht mit Talkumpuder bestäuben.

**WARNUNG:** Das Produkt nicht auf eine offene Wunde legen. Bei Auftreten von Reizungen, Beschwerden oder schlechter Durchblutung setzen Sie das Produkt ab und konsultieren Sie *unverzüglich* Ihren Arzt. KINDERSICHER AUFBEWAHREN.

Artikel-Nr. 10255

Flach

15 pro Pckg.



## Français

### SILOPAD™ Pastilles autocollantes Pressure Sensitive Dots

- Le produit libère progressivement une huile minérale médicale (U.S.P.) qui adoucit et hydrate la peau.
- Le produit est lavable et réutilisable; il a également été testé dermatologiquement.

#### Indications:

- Traitement des lésions cutanées dues à la pression et au frottement, telles que cloques, cors, callosités ou zones sensibles. Favorise également la cicatrisation.

#### Mode d'emploi:

- Laver et sécher la lésion.
- Coller la pastille à l'attelle, au bandage ou au pansement, de manière à ce que le côté gélifié soit en contact direct avec la lésion cutanée.
- Suspendre l'application du produit au moins 3 à 4 heures par jour pour permettre à la peau de respirer.

#### Conseils d'entretien:

Laver le produit à la main. Laisser sécher le produit à l'air et appliquer éventuellement un peu de talc après le séchage.

**AVERTISSEMENT :** ne pas placer le produit sur une plaie ouverte. En cas d'irritation, de gêne ou de problèmes circulatoires, interrompre l'utilisation et faire *immédiatement* appel à un médecin. TENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

Produit n° 10255

Plate

15 par paquet

